


Link do produktu: <https://progselection.pl/cegi-boczne-do-paznokci-progline-nc106-p-1272.html>

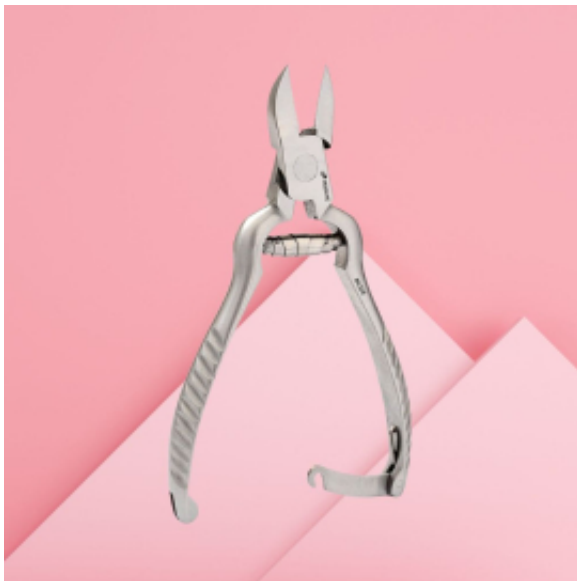

## Cęgi boczne do paznokci Progline NC106

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>97,00 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>NC106</b>         |
| Kod producenta   | <b>NC106</b>         |
| Kod EAN          | <b>5903857400274</b> |

### Opis produktu

Cęgi do paznokci NC106 to specjalistyczne narzędzie **do zabiegów podologicznych**. Model ten jest niezwykle wytrzymały. Wyposażyliśmy go w mechanizm sprężynowy oraz zamek do zapinania ramion. Jego ostrza o standardowym kształcie są bardzo ostre, dzięki czemu pozwalają na precyzyjną pracę. Dolna część narzędzia posiada wyżłobienia co sprawia, że bardzo pewnie leżą w dłoni. Cęgi rekomendujemy **do obcinania twardych paznokci**.

### MATERIAŁ:

Wykonane ze stali AISI 420

### PARAMETRY:

- posiadają **sprężynę „baryłkową”**
- wbudowany **zamek do zapinania ramion**
- masywna budowa
- **antypoślizgowe** rękojeści
- narzędzie o **długości ok.14 cm**
- **ostrze o długości ok.18 mm**

### PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE:

- cęgi przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- **regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie**
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń narzędzie przed upadkiem

### DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA:

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

---

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

### **Dezynfekcja**

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

### **Sterylizacja**

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.