


Link do produktu: <https://progselection.pl/cegi-do-wrastajacych-paznokci-progline-nc114-p-1254.html>

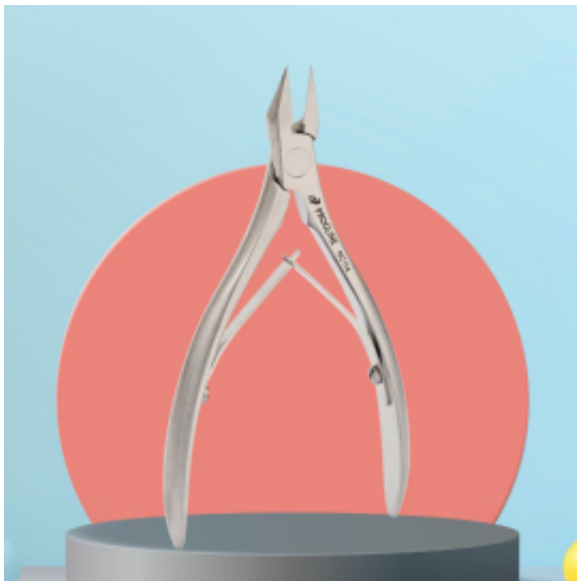

Cęgi do wrastających paznokci Progline NC114

Cena	97,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NC114
Kod producenta	NC114
Kod EAN	5903857400328

Opis produktu

Podologiczne cęgi **do wrastających paznokci**. Cęgi kątowe do paznokci NC114 są wysokiej jakości akcesorium do profesjonalnych zabiegów podologicznych. Ostrza modelu NC114 mają wyprofilowany kształt, dzięki czemu są szczególnie użyteczne przy podcinaniu wrastających paznokci w części bocznej. Ostrza po zamknięciu układają się w stosunkowo **wąski szpic**. Ich główka ma prostą formę, natomiast część poniżej wraz z ramionami zaokrągliliśmy.

MATERIAŁ

Wykonane ze stali AISI 420

PARAMETRY:

- posiadają **podwójną sprężynę**
- **ostrzone ręcznie** na diamentowej ściernicy
- Metoda **kucia ręcznego**
- narzędzie o **długości ok. 11 cm**
- ostrze o długości **ok. 12 mm**
- przeznaczone do dezynfekcji oraz sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134° Celsjusza

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE:

- cęgi przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- **regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie**
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń narzędzie przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA;

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

-
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
 5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
 6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.